

Ambiance
Healthcare®



DYMACARE®

advanced protection

ORALE ZORG

Het risico op ziekenhuisopgelopen
longontsteking verminderen

VAP en HAP ZIJN ERNSTIGE RISICO'S VOOR PATIËNTEN IN ZIEKENHUIZEN


VAP (beademingsgeassocieerde pneumonie) wordt gedefinieerd als een pneumonie die 48-72 uur of later optreedt na endotracheale intubatie en gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van nieuw of progressief infiltraat¹.

VAP draagt bij aan ongeveer de helft van alle gevallen van HAP (ziekenhuisopgelopen longontsteking).¹ Het is de op één na meest voorkomende nosocomiale infectie op de intensive care afdeling (ICU) en de meest voorkomende bij mechanisch beademde patiënten.^{3,4}

VAP komt naar schatting voor bij 9-27% van alle mechanisch beademde patiënten^{1,2}, met een sterftecijfer van circa 13%⁵

MEEST VOORKOMENDE OORZAKEN VAN VAP⁷:

- Kolonisatie van de tandplak met ziektekiemen uit de lucht die we inademen
- Kolonisatie van het orofaryngeale gebied met bacteriën
- Inademing van besmette afscheidingen uit de mond/keelholte

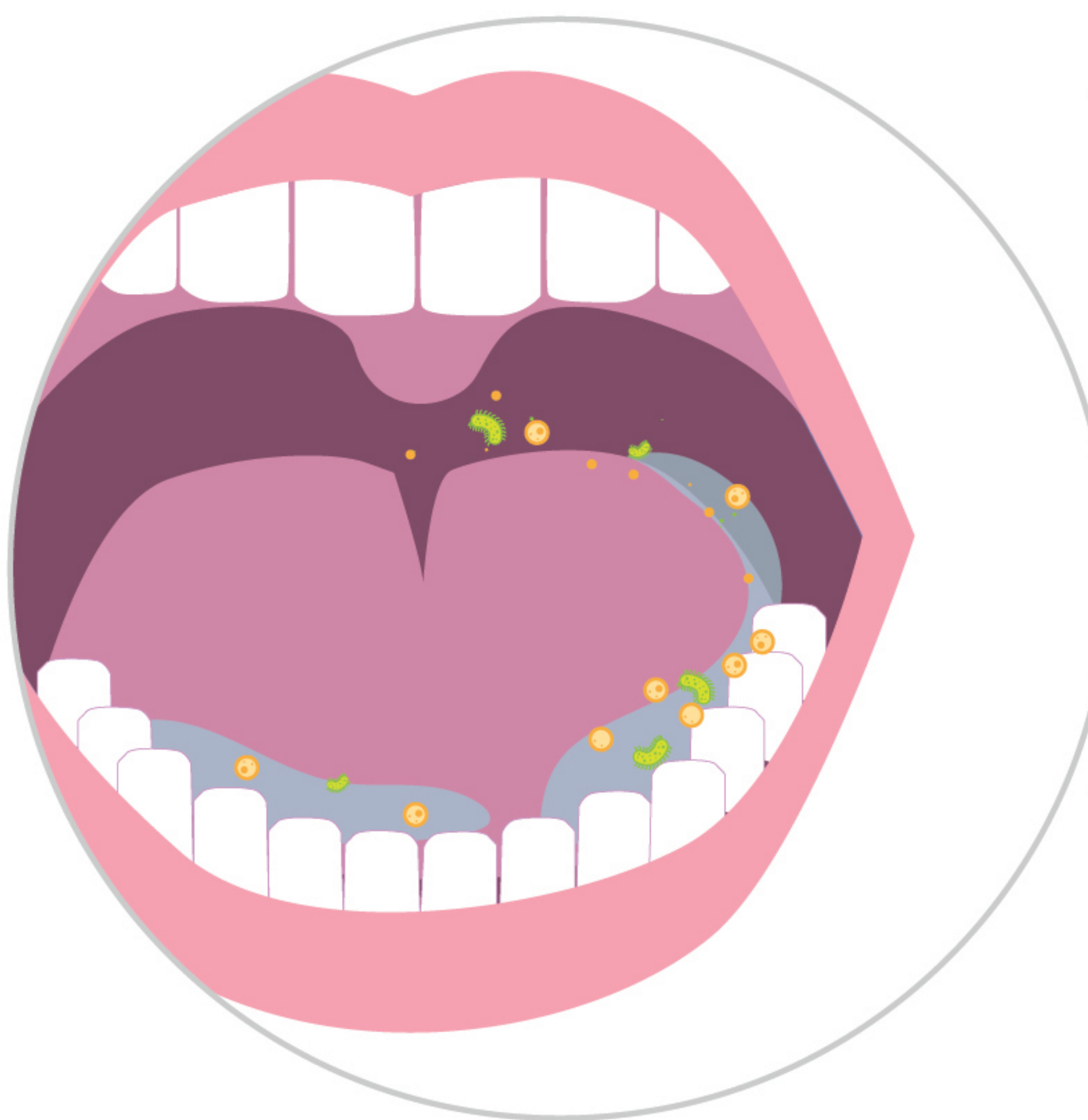

BACTERIËN EN VAP

De mondholte bevat gemiddeld 500 verschillende soorten bacteriën en elke milliliter speeksel bevat 10^7 - 10^{12} bacteriën. Uit uitstrijkjes van tracheaslijm blijkt dat het dezelfde bacteriestammen bevat die in tandplak worden aangetroffen en die VAP veroorzaken.⁶

Bacteriën die vaak voorkomen bij VAP¹:

- *Pseudomonas aeruginosa* • *Staphylococcus aureus* • MRSA
- *Enterobacter spp.* • *Klebsiella pneumoniae* • *Escherichia coli*
- *Streptococcus pneumoniae*

27%

**mechanisch
beademde patiënten
krijgen naar
schatting VAP^{1,2}**



2e

**meest
voorkomende
infectie op
ICU's^{4,5}**

**sterftecijfer
van circa⁵**

13%

MONDVERZORGING STANDAARDISEREN OM VAP TEGEN TE GAAN

TIJD OM MONDZORG TE STANDAARDISEREN

Een veelvoorkomend probleem binnen de gezondheidszorg is het gebrek aan richtlijnen. Net zo vaak - geen productnormen. Ongecoördineerd gebruik van verschillende mondverzorgingsproducten en mond antiseptica. Bovendien is mondverzorging vaak gebaseerd op persoonlijke ervaring en bestaande tradities. Als gevolg daarvan is er een grote verscheidenheid aan apparatuur en protocollen voor degenen die mondverzorging toepassen. Dit leidt tot fouten en een toename van infecties in ziekenhuizen. Een consistente aanpak zorgt voor consistente positieve resultaten.

Uitgebreid portfolio

Wij bieden een breed scala aan producten om uw patiënten te beschermen en u te helpen de mondverzorging te standaardiseren.

Onze producten kunnen u helpen bij het leveren van mondzorg

- Consistentie
- Efficiëntie
- Veiligheid

HET WELZIJN VAN UW PATIËNTEN BEVORDEREN



De mondgezondheid beschermen door ervoor te zorgen dat de mondholte schoon en vochtig blijft



Een slechte mondhygiëne kan ook de stemming van een patiënt beïnvloeden



Verminder het risico op VAP en HAP door de mondholte regelmatig schoon te maken en kiemvrij te houden.



REFERENTIES:

1. American Thoracic Society, Infectious Diseases Society of America: Guidelines for the management of adults with hospital-acquired, ventilator-associated, and health care-associated pneumonia. Am J Respir Crit Care Med 2005, 171: 388-416.
2. Chastre J, Fagon JY: State of the art: ventilator-associated pneumonia. Am J Respir Crit Care Med 2002, 165: 867-903. 10.1164/ajrccm.165.7.2105078
3. Hunter JD: Ventilator associated pneumonia. BMJ 2012, 344: e3325. 10.1136/bmj.e3325
4. Afshari A, Pagani L, Harbarth S: Year in review 2011: Critical care - infection. Crit Care 2012, 16: 242-247. 10.1186/cc11421
5. Melsen WG, Rovers MM, Groenwold RH et al (2013) Attributable mortality of ventilator-associated pneumonia: a meta-analysis of individual patient data from randomised prevention studies. Lancet Infect Dis 13:665-671
6. Cason et al. Nurses impl. of Guidelines for ventilator associated Pneumonia. American Journal of critical care 2007; 1/16:1
7. Schleider B, et al., J Advocate Health Care. 2002;4(1):27-30.

ONBEHANDELDE ALL-IN-ONE TRAYSYSTEMEN



DYMACARE® ONBEHANDELDE MONDREINIGENDE TANDENBORSTEL MET AFZUIGING met alcoholvrije mondwater + mondbevochtiger

Kan rechtstreeks worden aangesloten op standaard afzuigsystemen


Systeem bevat:

100 eenheden/doos

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1 Onbehandelde tandenborstel met afzuiging | 1 Mondwater zonder alcohol 15ml |
| 1 Onbehandelde swab | 1 Mondbevochtiger 4g |

Artikel nummer: 344001

REF DYOC201

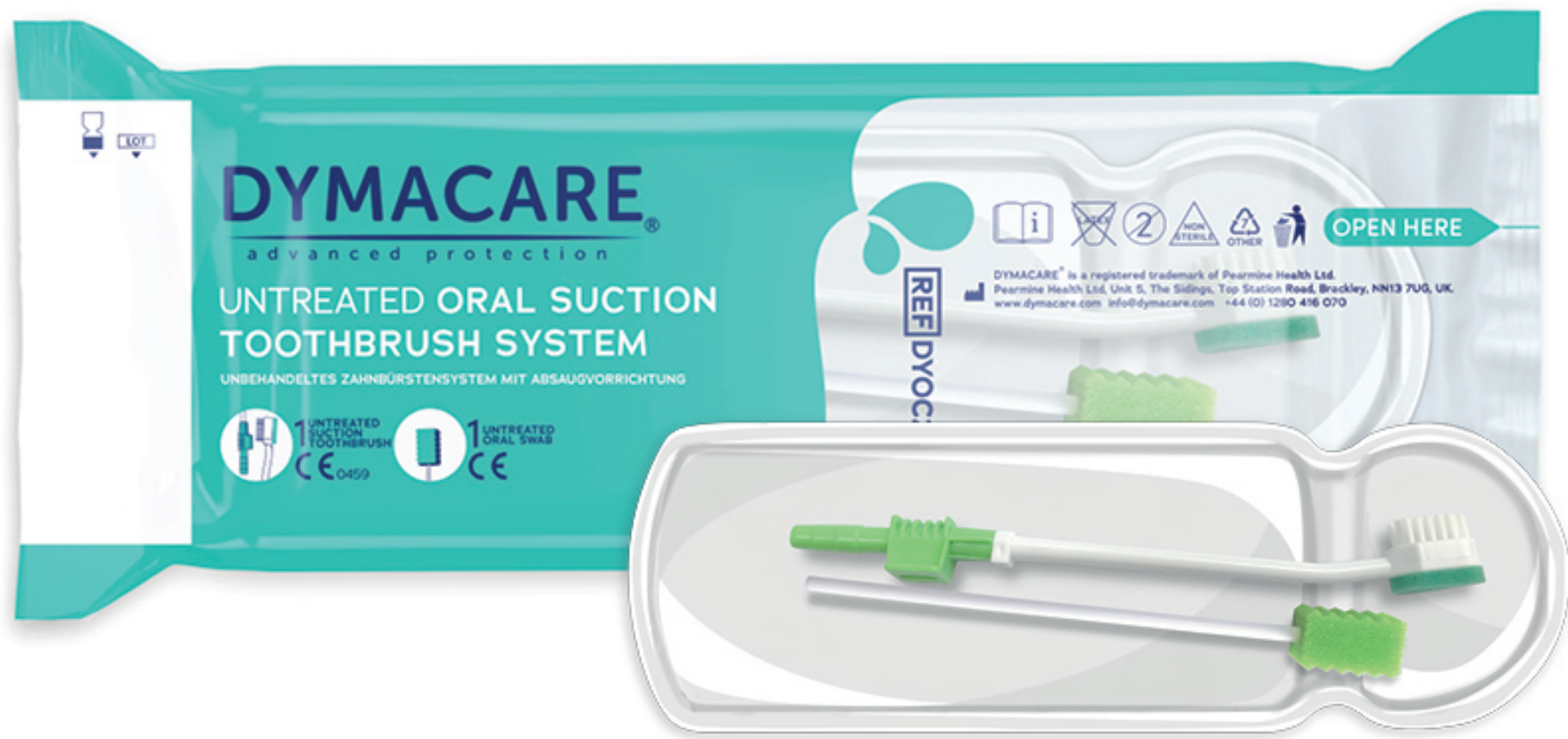

DYMACARE® ONBEHANDELDE TANDENBORSTELSYSTEEM MET AFZUIGING

Kan rechtstreeks worden aangesloten op standaard afzuigsystemen


Systeem bevat:

100 eenheden/doos

- | |
|--|
| 1 Onbehandelde tandenborstel met afzuiging |
| 1 Onbehandelde swab |

Artikel nummer: 344002

REF DYOC205

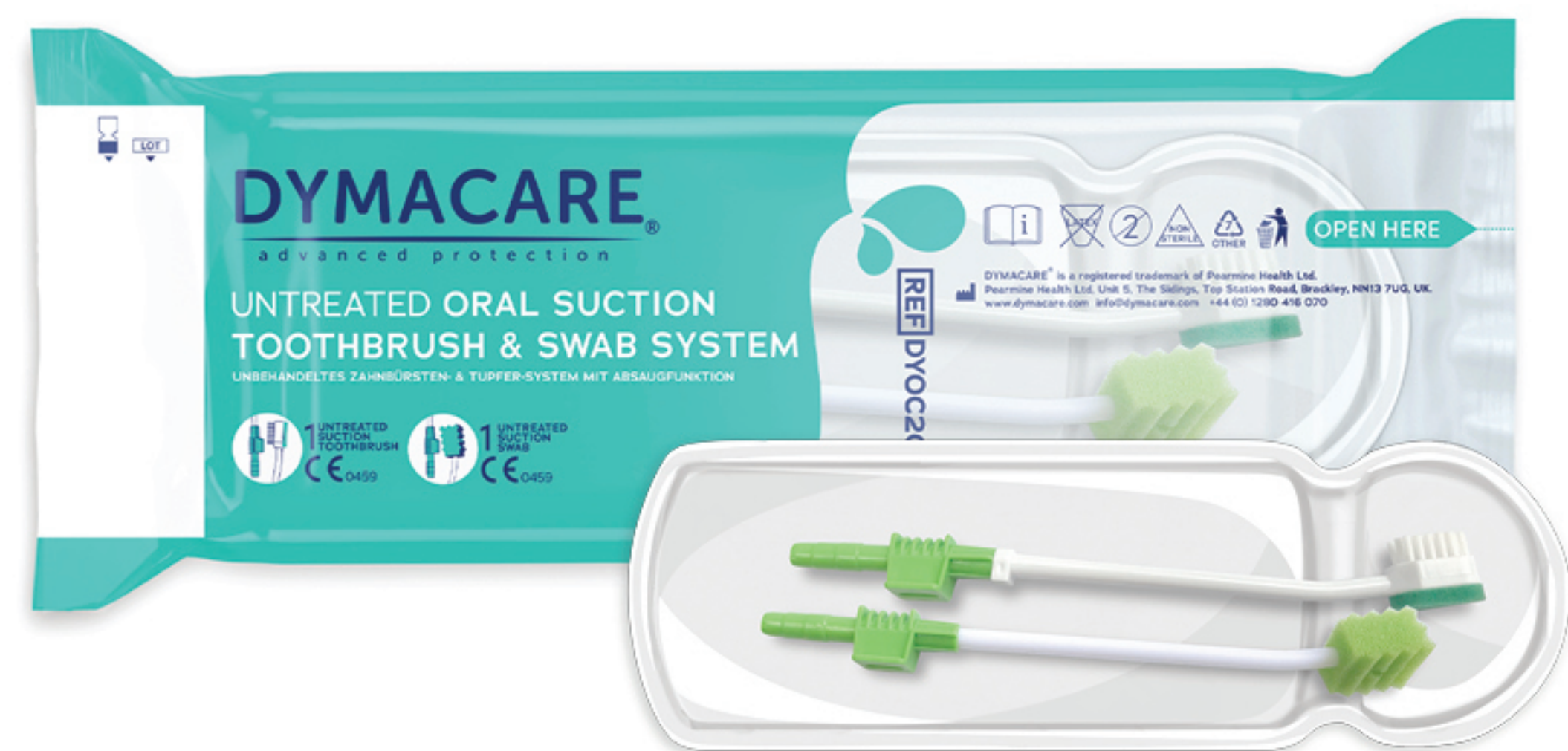

DYMACARE® ONBEHANDELDE TANDENBORSTEL & SWAB MET AFZUIGING SYSTEEM

Kan rechtstreeks worden aangesloten op standaard afzuigsystemen

Systeem bevat:

100 eenheden/doos

- | |
|--|
| 1 Onbehandelde tandenborstel met afzuiging |
| 1 Onbehandelde swab met afzuiging |

Artikel nummer: 344003

REF DYOC206



DYMACARE® ONBEHANDELD SWAB SYSTEEM MET AFZUIGING met alcoholvrije mondwater + mondbevochtiger

Kan rechtstreeks worden aangesloten op standaard afzuigsystemen

Systeem bevat:

100 eenheden/doos

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 2 Onbehandelde swabs met afzuiging | 1 Mondwater zonder alcohol 15ml |
| | 1 Mondbevochtiger 4g |

Artikel nummer: 344004

REF DYOC207



DYMACARE® ONBEHANDELDE TANDENBORSTEL & SWAB MET AFZUIGING SYSTEEM II met alcoholvrije mondwater + mondbevochtiger

Kan rechtstreeks worden aangesloten op standaard afzuigsystemen

Systeem bevat:

100 eenheden/doos

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1 Onbehandelde tandenborstel met afzuiging | 1 Mondwater zonder alcohol 15ml |
| 1 Onbehandelde swab met afzuiging | 1 Mondbevochtiger 4g |

Artikel nummer: 344005

REF DYOC209

NIEUW



DYMACARE® ONBEHANDELDE TANDENBORSTEL & SWAB MET AFZUIGING SYSTEEM III chloorhexidine-mondwater en mondbevochtiger

Kan rechtstreeks worden aangesloten op standaard afzuigsystemen

Systeem bevat:

100 eenheden/doos

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 Onbehandelde tandenborstel met afzuiging | 1 Mondwater met chloorhexidine 15ml |
| 1 Onbehandelde swab met afzuiging | 1 Mondbevochtiger 4g |

Artikel nummer: 344006

REF DYOC259

MET NATRIUMBICARBONAAT BEHANDELDE ALLES-IN-ÉÉN TRAY SYSTEEM

Dentifrice INCI: Sodium Bicarbonate, Lauryl Glucoside, Cellulose Gum, Aqua (Water), Sodium Benzoate, Sucralose, Mentha Viridis (Spearmint) Leaf Oil (Limonene)



DYMACARE® SWAB SYSTEEM MET NATRIUMBICARBINAAT met alcoholvrij mondwater + mondbevochtiger

Systeem bevat:

100 eenheden/doos

2 Natriumbicarbonaat behandelde swab systeem	1 Mondwater zonder alcohol 15ml
	1 Mondbevochtiger 4g

Artikel nummer: 344010

REF
DYOC202



DYMACARE® SWAB SYSTEEM MET NATRIUMBICARBINAAT EN ZUIGFUNCTIE

Kan rechtstreeks worden aangesloten op standaard afzuigsystemen

Systeem bevat:

100 eenheden/doos

2 Natriumbicarbonaat behandelde swabs met afzuiging	1 Mondwater zonder alcohol 15ml
1 Orale swab	1 Mondbevochtiger 4g

Artikel nummer: 344011

REF
DYOC203



DYMACARE® SWAB SYSTEEM MET NATRIUMBICARBINAAT EN ZUIGFUNCTIE met alcoholvrij mondwater + mondbevochtiger

Kan rechtstreeks worden aangesloten op standaard afzuigsystemen

Systeem bevat:

100 eenheden/doos

2 Natriumbicarbonaat behandelde swabs met afzuiging	1 Mondwater zonder alcohol 15ml
1 Orale swab	1 Mondbevochtiger 4g

Artikel nummer: 344012

REF
DYOC204



DYMACARE® SWAB SYSTEEM MET NATRIUMBICARBINAAT EN ZUIGFUNCTIE III met alcoholvrij mondwater + mondbevochtiger

Kan rechtstreeks worden aangesloten op standaard afzuigsystemen

Systeem bevat:

100 eenheden/doos


1 Natriumbicarbonaat behandelde swab met afzuiging	1 Mondwater zonder alcohol 15ml
1 Onbehandelde swab	1 Mondbevochtiger 4g

Artikel nummer: 344013

REF
DYOC208



Het individueel verpakte Dymacare Oral System bevat alles wat je nodig hebt om je mond te reinigen.

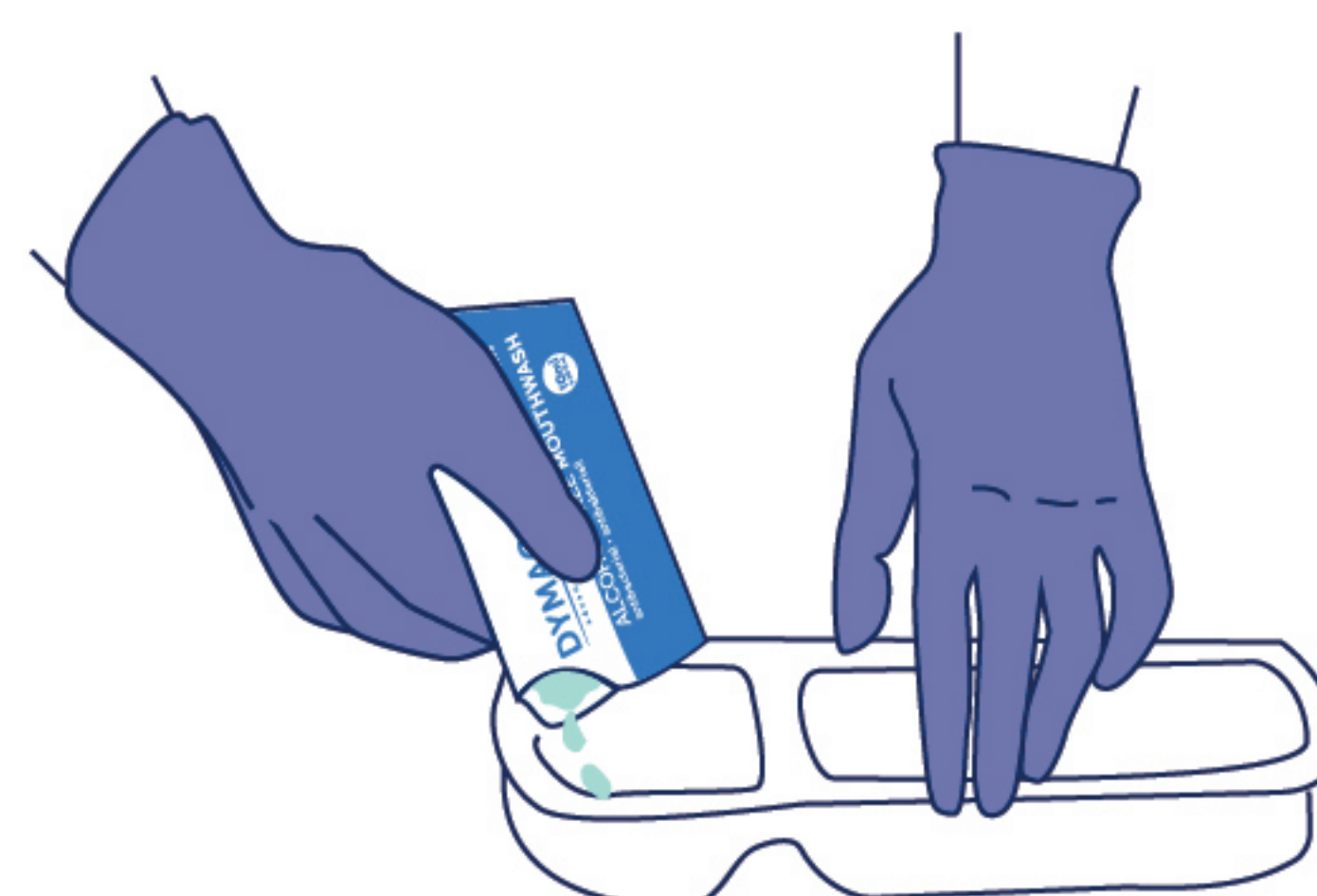

Elk systeem heeft een vloeistofbakje om de gedoseerde mondverzorgingsoplossing in te bewaren. Gebruik ons systeem om naar behoefte de wattenstaafjes of tandenborstels te bevochtigen.



DYMACARE® Individueel verpakte onbehandelde zuigtandenborstels in een dispenserdoosje

De zuigtandenborstel kan worden aangesloten op een standaard zuigleiding en worden bediend met de duimpoort. De zuigfunctie helpt om secreet, vuil en slijm uit de mond van de patiënt te verwijderen. Gewoon makkelijk aan te sluiten op een standaard afzuiglijn en bedienen met de duimpoort. Kan alleen worden gebruikt of in combinatie met mondwater en andere antibacteriële oplossingen. Verpakt in een handig dispenserdoosje.

Artikel nummer: 344015

REF DYOC100 (200) 2 dispenserdozen per doos (totaal 200 stuks) **CE** 0459



DYMACARE® Individueel verpakte, onbehandelde swab met zuigfunctie in een dispenserdoosje

Gebruik de swab met afzuig functie voor mondreiniging als poetsen niet nodig is. Gewoon makkelijk aan te sluiten op een standaard afzuiglijn en bedienen met de duimpoort. De zuigfunctie helpt om afscheidingen, vuil en slijm uit de mond van de patiënt te verwijderen en de schuine kop vergemakkelijkt het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. Verpakt in een handige dispenserhouder.

Artikel nummer: 344016

REF DYOC101 (200) 2 dispenserdozen per doos (totaal 200 stuks) **CE** 0459



DYMACARE® Individueel verpakte, onbehandelde swab in een dispenserdoosje

Helpt om vuil en slijm uit de mond van de patiënt te verwijderen. Kan alleen worden gebruikt of in combinatie met mondwater, vochtinbrengende crème en andere antibacteriële oplossingen. Verpakt in een handige dispenserdoos.

Artikel nummer: 344017

REF DYOC102 (500) 2 dispenserdozen per doos (totaal 500 stuks) **CE**



DYMACARE® Individueel verpakte, met natriumbicarbonaat behandelde swab met zuigfunctie in een dispenserdoosje

Gebruik de swab voor mondreiniging als poetsen niet nodig is. De swab kan worden aangesloten op een standaard afzuiglijn en worden bediend met de duimpoort. De zuigfunctie helpt bij het verwijderen van secreet, vuil en slijm uit de mond van de patiënt en de schuine kop vergemakkelijkt het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. Verpakt in een handige dispenserhouder.

Artikel nummer: 344018

REF DYOC103 (200) 2 dispenserdozen per doos (totaal 200 stuks) **CE** 0459



DYMACARE® Individueel verpakte, met natriumbicarbonaat behandelde swab in een dispenserdoosje

Helpt om vuil en slijm uit de mond van de patiënt te verwijderen. Kan alleen worden gebruikt of in combinatie met een mondbevochtiger en andere antibacteriële oplossingen. Verpakt in een handige dispenserdoos.

Artikel nummer: 344019

REF DYOC104 (300) 2 dispenserdozen per doos (totaal 300 stuks) **CE**



DYMACARE® Mondwater zonder alcohol 15ml / DYOC105

Antibacterieel mondwater kan gebruikt worden met swabs en tandenborstels, maar ook als mondspoeling. Mondspoeling met muntsmaak doodt bacteriën en verfrist de mondholte.

INGREDIËNTEN:

Aqua, Glycerin, Poloxamer 407, Aroma, Sodium Benzoate, Sodium Saccharin, Cetylpyridinium Chloride, Sodium Fluoride, Citric Acid, CI 42051. Contains 0.05% w/w Sodium Fluoride (225 ppm F).

REF DYOC105 250 eenheden/doos Artikel nummer: 344025



DYMACARE® Mondbevochtiger 4g / DYOC106

Om uitdroging van de mondholte te voorkomen; gebruik de swab om de moisturizer aan te brengen op de mond en lippen van de patiënt. De moisturiser heeft een verfrissende muntsmaak.

INGREDIËNTEN:

Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Polysorbate 20, Hydroxyethylcellulose, Sodium Benzoate, Aroma, Citric Acid, Sucralose, Aloe Barbadensis Leaf Juice, CI 18965, CI 42051.

REF DYOC106 300 eenheden/doos Artikel nummer: 344026



DYMACARE® Mondwater met chloorhexidine 15ml / DYOC109

Antibacterieel chloorhexidine mondwater kan gebruikt worden met swabs en tandenborstels, maar ook als mondspoeling. Mondspoeling met muntsmaak doodt bacteriën en verfrist de mondholte.

INGREDIËNTEN:

Aqua, Hydrogenated Starch Hydrolysate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Mentha Piperita (Peppermint) Oil [Limonene, Linalool], Erythritol, Rebaudioside A, Chlorhexidine Digluconate, Potassium Sorbate.

REF DYOC109 250 eenheden/doos Artikel nummer: 344027



Individueel verpakt om besmetting te voorkomen



Verpakt in gemakkelijk toegankelijke dispenserdozen



Consistente zorg & snellere processen



Wegwerpverpakking voor eenmalig gebruik is hygiënischer



Gemakkelijker hanteren en transporteren



Gebruikte items onmiddellijk weggooien om hygiënische omstandigheden te behouden


HOE MONDVERZORGINGSPRODUCTEN GEBRUIKEN: DYMACARE®

advanced protection

Ons assortiment mondverzorgingsproducten is bedoeld voor eenmalig oraal gebruik. Voor elk product:



1. Draag altijd handschoenen.
2. Scheur de verpakking open. Als je mondspoeling gebruikt, giet de vloeistof dan in het daarvoor bestemde bakje.
3. Als u een afzuigapparaat gebruikt (indien van toepassing), verzadig dan een tandenborstel/ swab met mondwater. Bevestig deze aan de zuigleiding.

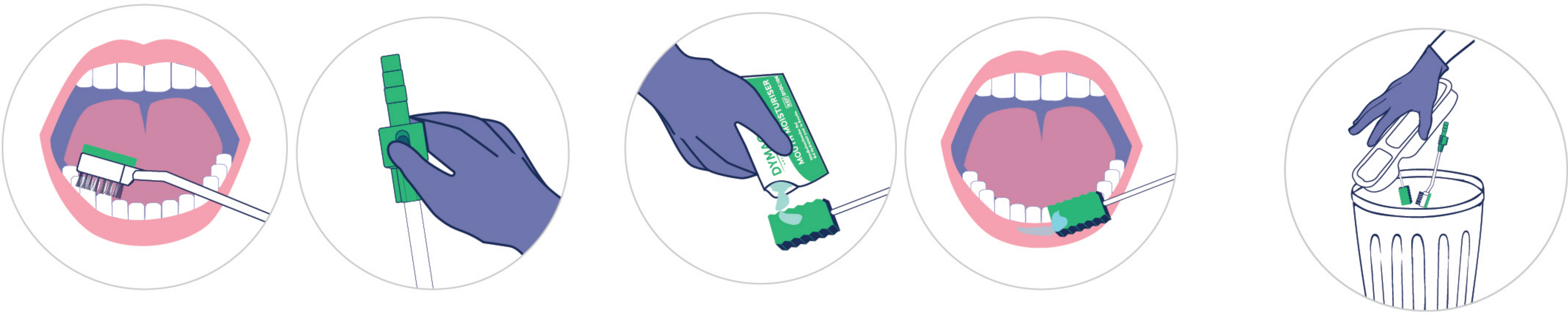

4. Inspecteer eerst de mondholte en poets dan de tanden, wangen, het tandvlees en de tong. Plaats de duim over de zuigklep om de zuigkracht te verhogen. Reinig de mond gedurende 1 minuut.
5. Breng indien nodig en met behulp van de swab de vochtinbrengende crème aan op de lippen en mondholte.
6. De gebruikte kit en handschoenen weg. Was de handen. Documenteer het proces volgens het instellingsprotocol.

LET OP: Alleen voor eenmalig gebruik. Pas gecontroleerd vacuüm toe om letsel te voorkomen. Gebruik minimale kracht bij het werken in de mondholte. Laat de patiënt niet op het apparaat bijten. Gebruik een bijtblok als de patiënt een veranderd niveau van bewustzijn heeft. Wees voorzichtig met kinderen en niet-responsieve personen. Niet bedoeld voor gebruik op beschadigde huid. Stop het gebruik als irritatie optreedt. Na de behandeling: zorg ervoor dat het apparaat intact is en dat de mondholte vrij is van deeltjes en letsel.

De vermelde producten zijn niet-steriele medische hulpmiddelen van KLASSE I en KLASSE IIa. Bedoeld voor gebruik door professionals in de gezondheidszorg. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op het bijbehorende etiket.



- INDIVIDUELE MONDVERZORGINGSSYSTEMEN
- flexibel - individueel configureerbaar voor elke patiënt
 - kostenbesparend - geen onnodige onderdelen
 - een selectie van verschillende opties voor elke situatie

- ✓ Wij bieden kwaliteitsproducten, gemaakt in het Verenigd Koninkrijk
- ✓ We kunnen sets op maat maken
- ✓ We bieden concurrerende prijzen
- ✓ We zijn snel te implementeren (levering van speciale oplossingen binnen 8 weken)

DYMACARE® is een geregistreerd handelsmerk van Pearmine Health Ltd.

Gemaakt in UK.
Ambiance Healthcare B.V.

info@ambiancehealthcare.com
ambiancehealthcare.com

+31 (0)30 401 0440



[CH] Mediq Suisse AG, Gewerbestrasse 12
Egg bei Zürich, CH-8132, Switzerland.

[EU] Medadvance GmbH & Co KG,
Reisertstr. 24, 53773 Hennef, Deutschland.

[CH] MedEnvoy Switzerland,
Gotthardstrasse 28, 6302 Zug, Switzerland.

[EC] REP Advena Ltd., Tower Business Centre,
2nd Flr, Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malta.